

Gebrauchsanweisung DE
GOeasy Reprint Bite - Automix 1:1
Bissregistriermaterial,
additionsvernetzendes Silikon

GOeasy Reprint Bite ist ein sehr hartes Bissregistriermaterial für eine schnelle und genaue Bissregistrierung. Durch die Applikation aus selbstmischenden Automix-Kartuschen kann es direkt und blasenfrei auf den Zahn appliziert werden. Das Bissregistriermaterial basiert auf additionsvernetzenden Vinylsilikonen. GOeasy Reprint Bite ist ein spritzbares Material für die Bissregistrierung, das auch in der Schlußbissstellung verwendbar ist. Auch kann es als Schlüsselmaterial, z.B. für intraorale Stützstift-Registrate angewendet werden. Ferner kann GOeasy Reprint Bite für die Bissgabeltechnik benutzt werden. GOeasy Reprint Bite kann aufgrund seiner hohen Endhärte sehr leicht geätzt werden und ist nicht brüchig. Dank der thixotropen Eigenschaften und der damit verbundenen Standfestigkeit von GOeasy Reprint Bite wird ein

Einfließen in die Interdentalräume vermieden, und eine leichte Mundentnahme wird ermöglicht.

Vorbereiten der Automix-Kartusche

Die Kartusche in das Austraggerät setzen und die Verschlusskappe entfernen.

Eine der mitgelieferten Mischkanülen aufsetzen und durch seitliches Verdrehen um 90° fixieren. Das Material kann nun direkt appliziert werden.

Anmerkung:

Die gebrauchte Mischkanüle dient bis zur nächsten Applikation als Verschuß.

Die Kartusche nicht wieder mit dem

Originalverschluß versehen, da hierbei eine gegenseitige Kontamination und somit unbeabsichtigtes teilweises Aushärten nicht ausgeschlossen werden kann..

Registrierung

Das automatisch gemischte Material wird direkt auf die zu registrierenden Occlusalflächen appliziert. Nach **20 Sekunden** (Verarbeitungs- bzw- Applikationszeit bei 23°C) soll der Biss geschlossen werden. Nach **45 Sekunden** im Mund ist das Material ausgehärtet und das Registrat kann entnommen werden.

Anmerkung:

Verwenden Sie keine Latex-Handschuhe, da diese durch Kontamination die Abbindereaktion der Polyvinyle beeinträchtigen können. Den präparierten Zahn nicht mit solchen Handschuhen berühren.

Artikulator

GOeasy Reprint Bite erlaubt eine exakte Kontrolle bei der Fixierung des Gipsmodells im Artikulator. Registrate aus GOeasy Reprint Bite sind über Monate lagerfähig, ohne zu schrumpfen.

Lagerung

Nicht über 25 °C lagern! Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden!

Garantie

P.L. Superior Dental Materials GmbH garantiert, daß dieses Produkt frei von Material- und Herstellfehlern ist. P.L. Superior Dental Materials GmbH übernimmt keine weitere Haftung, auch keine implizite Garantie bezüglich Verkäuflichkeit oder Eignung für einen


bestimmten Zweck. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes. Wenn innerhalb der Garantifrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von P.L. Superior Dental Materials GmbH in der Reparatur oder dem Ersatz des P.L. Superior-Produktes.

Haftungsbeschränkung

Soweit ein Haftungsausschluß gesetzlich zulässig ist, besteht für P.L. Superior Dental Materials GmbH keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!

Die Gebrauchsanweisung ist für die Dauer der Verwendung aufzubewahren.

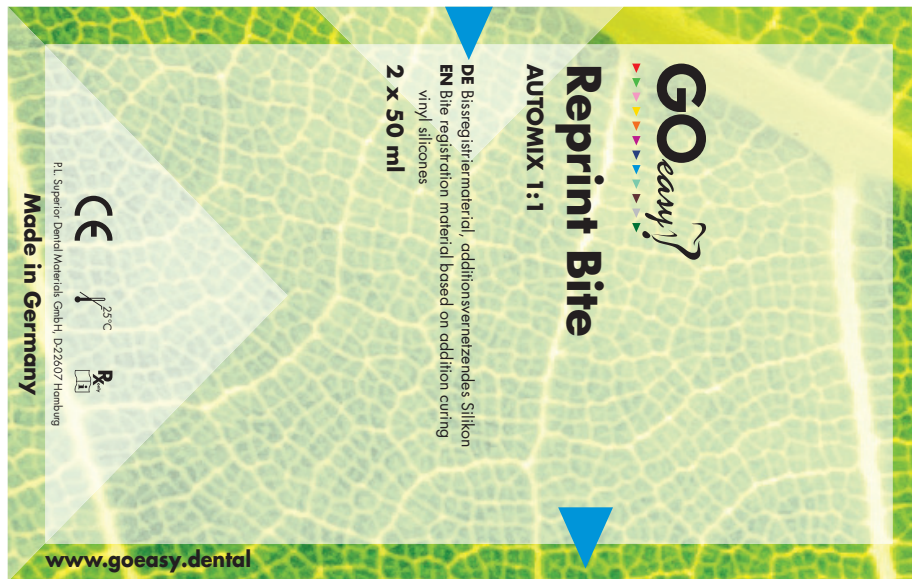

Instructions for Use EN

GOeasy Reprint Bite – Automix 1:1

Bite registration material based on addition curing vinyl silicones

GOeasy Reprint Bite is very hard and fast setting bite registration material. With the Automix-cartridge GOeasy Reprint Bite can be syringed directly onto the teeth. The bite registration material is based on addition curing vinyl silicones.

GOeasy Reprint Bite can be used for centric occlusions. It can also be applied as key material e.g. for taking intraoral registrations with posts. Finally, it can be used for the bite fork technique.

GOeasy Reprint Bite is very suitable for cutting and contouring because of its extremely high final hardness.

Thanks to its thixotropy, undesired flow of GOeasy Reprint Bite into dental interstices is prevented and allows an easy removal.

Therefore GOeasy Reprint Bite can be applied very easily.

Preparation of the Automix-Cartridge

Mount the cartridge into the application gun. Remove and dispose the closure-cap. Install one of the supplied mixing cannulas onto the cartridge and extrude needed material.

Note:

Store used cartridge with fixed used mixing cannula. **Do not re-use the cartridge cap.** Closing the cartridge by turning on the cap between use could cause cross contamination of components and thus premature setting.

Bite registration

The automatically mixed material is applied directly onto the occlusal areas. The bite should be closed within **20 seconds** after the beginning of the extruding (working or application time at 23 °C or 74 °F).

The recommended time in mouth is about **45 seconds**

Note:

Do not contact the product with latex or sulfur-containing polymeric gloves. Do not touch prepared tooth with gloves.

Articulator

GOeasy Reprint Bite allows a visual control during fixing of the gypsum model in the articulator.

Registrates made from GOeasy Reprint Bite can be stored over months without shrinking.

Storage

Do not store above 25 °C (77 °F)! Do not use after expiration date.

Warranty

P.L. Superior Dental Materials GmbH warrants this product will be free from defects in material and manufacture.

P.L. Superior Dental Materials GmbH makes no other warranties including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. User is responsible for determining the suitability of the product for user's application. If this product is defective within the warranty period, your exclusively remedy and P.L. Superior Dental Materials GmbH's sole obligation shall be repair or replacement of the P.L. Superior product.

Limitation of Liability

Except where prohibited by law, P.L. Superior Dental Materials GmbH will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

Keep away from children!

For dental professional use only!

The instructions for use has to be kept for the duration of the application.

Caution:

Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.